




DISTRIBUTED BY :
PT. BERITO JAYA MEDIKA
Jl. Achmad Jais No.34 Ruko Grand Achmad
Jais Blok C-2, Peneleh, Kec. Genteng,
Surabaya, Jawa Timur 60274
KEMENKES RI AKD 20902620204

TOO CARE SYRINGE PUMP


TCSP-S7




49%
TKDN
Tingkat Komponen Dalam Negeri

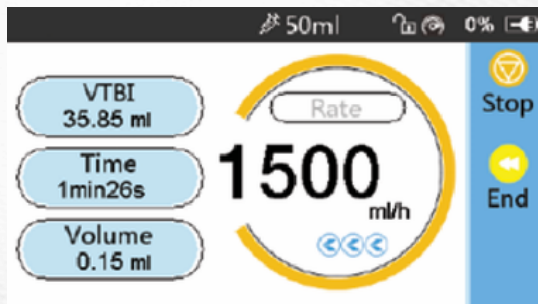


DETAIL LAYAR 1

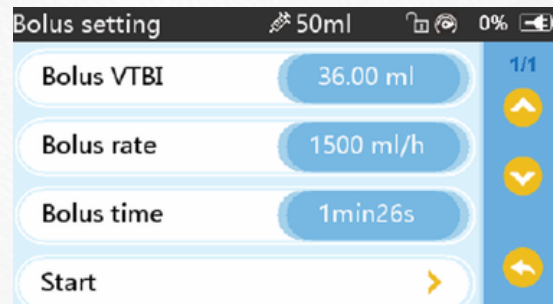

DETAIL LAYAR 2

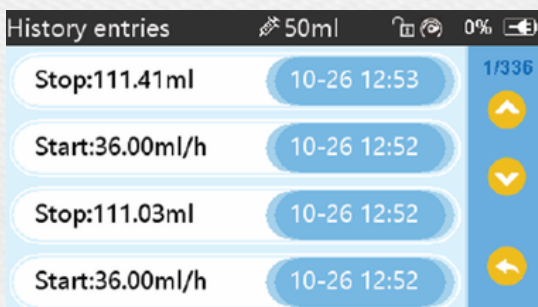

DETAIL LAYAR 3

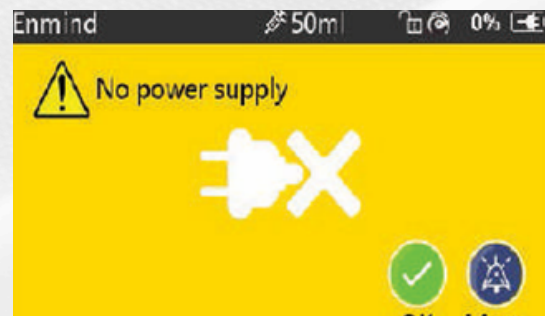

DETAIL LAYAR 4



DESCRIPTION

FITUR

- LCD touchscreen extra besar 4.3" dengan tampilan user-friendly
- Dilengkapi indikator alarm berupa tampilan dan suara sebagai peringatan
- multifungsi untuk memantau pengoperasian
- Pengaturan parameter User-Friendly dengan layar touchscreen ukuran besar
- Multiple tipe pengoperasian infus untuk penggunaan fleksibel
- Flow rates presisi dengan setting fleksibel dapat di adjust tanpa
- memberhentikan proses infus dengan jangkauan nilai yang luas
- Kapasitas drug library besar yang memudahkan penentuan jenis obat
- Kapasitas riwayat data besar untuk memudahkan pemantauan dosis obat

STANDAR KONFIGURASI

- Main unit
- Power Cord
- Syringe

SPESIFIKASI DASAR

- Tampilan Layar : 4.3" LCD Touchscreen
- Tipe Jarum Suntik : 2/3 ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml
- Mode Infus : ml/h, body weight
- Flow Rate : 0.01 – 2000 ml/jam (Min. increment 0.01 ml/h)
- Akurasi : $\pm 2\%$
- VTBI : 0 – 9999 ml
- Bolus Rate : 0.1 ml – 2000 ml / jam
- Alarm : VTBI mendekati selesai, syringe hampir kosong, tekanan tinggi, baterai hampir habis, baterai habis, tidak ada baterai, tidak ada pasokan listrik, pemeriksaan pemasangan syringe, pengingat, dll.
- Occlusion Level : 12 Level yang dapat dipilih
- Rate KVO : 0.01 – 5.00 ml/jam
- Power input AC : 100 – 240 VAC 50/60Hz
- External DCPower : 12 VDC
- Kapasitas Baterai : 11.1 V 2600 mAh
- Waktu Pengisian : ± 5 jam pengisian dalam kondisi OFF
- Waktu Penggunaan Baterai : Hingga ± 12 jam
- Dimensi : ± 400 (Panjang) x 90 (Lebar) x 120 (Tinggi)mm
- Berat : ± 1.7 kg

RINGKASAN PENGGUNAAN

1. Hidupkan daya
2. Pasang syringe pada perangkat
3. Pilih merek syringe Pilih mode infus
4. Atur parameter infus
5. Hilangkan gelembung udara dari saluran
6. Hubungkan saluran infus dengan pasien
7. Mulai infus
8. Selesai infus
9. Lepaskan set syringe
10. Matikan daya



Peringatan !

Perangkat hanya dapat diatur atau diubah oleh personel yang terlatih dan profesional.



Harap membaca buku petunjuk penggunaan

